



Medical Device & telemedicine



itMED is a division of T.B.R. srl

Via Dalmazia, 5


21013 Gallarate (VA) - Italy

www.itmed.it

www.itmed.net

Defi-B Defi-N

- Defibrillatore con alimentazione a rete (Defi-N) e Defibrillatore con batterie ricaricabili (Defi-B)
- Mains powered defibrillator (Defi-N) and Accu powered defibrillator (Defi-B)

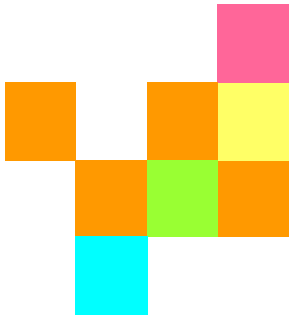

Defi B—N:Caratteristiche — Specifications

DEFI-N:Defibrillatore alimentato a rete

Subito pronto ed operativo

Indicato per medici e paramedici

Defibrillazione asincrona

Sicuro e di facile uso

All'accensione si attiva immediatamente un test auto-diagnostico con indicazione degli errori rilevati

Pittogrammi e diagrammi di flusso garantiscono un uso sicuro

L'utilizzatore viene costantemente informato circa lo stato operativo del defibrillatore

Piastre e cavi sono custoditi all'interno dell'apparecchiatura

DEFI-B:Defibrillatore con batterie interne ricaricabili

Subito pronto per essere utilizzato

Ideale per applicazioni su mezzi in movimento

Defibrillazione asincrona

Accumulatori ricaricabili ad alta capacità

Sicuro e di facile uso

All'accensione si attiva immediatamente un test auto-diagnostico con indicazione degli errori rilevati

Pittogrammi e diagrammi di flusso garantiscono un uso sicuro

L'utilizzatore viene costantemente informato circa lo stato operativo del defibrillatore

Piastre e cavi sono custoditi all'interno dell'apparecchiatura

Modo operativo: asincrono, defibrillazione esterna (Defi-N Defi-B)

Potenze: 20, 50, 100, 160, 250, 360 joule (50 Ω)

Tempo di carica: circa 9s(360 Joule) con 230V/50 Hz

Tempo di carica: circa 7s(360 Joule - Defi-B)

Piastre: Piastre per bambini integrate

Classificazione: Protezione tipo II, Tipo BF,

Apparecchiatura medica classe 2b

Questo strumento è una apparecchiatura medica in accordo con CE guideline 93/42/EEC.

Alimentazione principale: vedere dati di targa

Condizioni operative: 0 ... 40 °C, 30 ... 95 % umidità rel., senza condensa 700 hPa..1060hPa

Dimensioni: 40 x 48 x 12 cm (w x d x h)

Peso: 8,5 kg (9 Kg Defi-B)

DEFI-N:Mains-powered defibrillator

Immediately ready for operation

For medical practices and clinics

Asynchronous defibrillation

Safe and easy handling

After switching on, an immediate internal self-test is performed automatically with error-detection

Pictograms and a self-explanatory program flow ensure a secure handling

Clearly structured operative and display elements inform the user unmistakably about the operative state of the defibrillator

The paddle cables are kept safely in the housing

DEFI-B:Accu-powered defibrillator

Quickly ready for operation

For mobile application

Asynchronous defibrillation

High Accumulator capacity

Safe and easy handling

After switching on, an immediate internal self-test is performed automatically with error-detection

Pictograms and a self-explanatory program flow ensure a secure handling

Clearly structured operative and display elements inform the user unmistakably about the operative state of the defibrillator

Paddle cables are kept safely in the housing

Operating mode: asynchronous, external Defibrillation (Defi-N Defi-B)

Energy steps: 20, 50, 100, 160, 250, 360 joule (50 Ω)

Charging time: approx. 9s(360 Joule) with 230V/50 Hz

Charging time: approx. 7s(360 Joule - Defi-B)

Paddle: Paddle for children integrated

Classification: Protection type II, Type BF,

Medical device class 2b

Regulatory affairs: The product is a medical device according to EC guideline 93/42/EEC.

Nominal main circuit: see rating plate

Operating conditions: 0 ... 40 °C, 30 ... 95 % rel. humidity, but without condensation 700 hPa..1060hPa

Dimensions: 40 x 48 x 12 cm (w x d x h)

Weight: 8,5 kg (9 Kg Defi-B)

itMED division of TBR srl

21013 Gallarate—Italy (EEC)

Il contenuto e le specifiche di questo documento possono essere variate senza preavviso.

Specifications and contents of this document subject to change without notice